

Max: 300kg

ClassicHighBackSling bietet dem Anwender gute Sitzposition und hohes Sicherheitsgefühl. Er ist so konstruiert, dass er nach dem Versetzen im Stuhl verbleiben kann, d.h. der Anwender bleibt auf dem Hebegurt sitzen. Er bietet Stütze von den Kniekehlen bis hoch zum Kopf. ClassicHighBackSling ist in seiner Konstruktion auf die Bewältigung der gewöhnlichsten Hebesituationen vom Bett zum Rollstuhl etc. ausgelegt.

ClassicHighBackSling ist Teil einer Serie verschiedener Modelle von Hebegurten. Ausschlaggebend für die Wahl von Modell und Material sind die Funktionen des Anwenders und die jeweiligen Einsatzsituationen.

Die Hebegurte und Heber von RoMedics sind Teil des SystemRoMedic, einem Universalsystem für das Versetzen von Patienten. SystemRoMedic geht von vier verschiedenen Kategorien von Versetzungen aus: Umsetzen, Positionieren, Stützen und Heben.

## Kontrolle der Funktion

### Sichtprüfung

Führen Sie regelmäßige Funktionsprüfungen des Hebegurtes durch, in jedem Fall nach der Reinigung. Vergewissern Sie sich, dass das Material unversehrt und nicht verblichen ist. Bei Anzeichen von Verschleiß ist das Produkt zu verwerfen.

## Lesen Sie die Gebrauchsanleitung



Für sämtliche Hilfsmittel, die beim Umsetzen benutzt werden:

Achten Sie auf die richtige Größe des Hebegurtes, um die Gefahr des Herausgleitens oder Gefühl von Unbehagen zu vermeiden. Ein zu großer Hebegurt kann dazu führen, dass der Anwender herausgleitet.

Verweilen Sie während des Hebemoments beim Anwender.

Bringen Sie die Rückenösen des Hebegurtes vor den Ösen an der Beinstützen an und verwenden Sie einen zugelassenen Hebebügel.

Anbringen des Hebegurtes, wenn der Anwender im Bett/auf einer Liege oder auf dem Fußboden liegt:

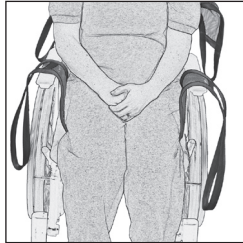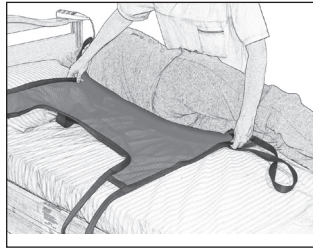

1. Wenden Sie den Anwender zu sich hin. Den Hebegurt so anlegen, dass dessen Mittellinie entlang dem Rückgrat und die untere Kante ca. 5-10 cm oberhalb der Kniegelenke des Anwenders zu liegen kommen. Die Kante des Hebegurtes so weit wie möglich unter dem Anwender positionieren.

2. Drehen Sie den Anwender zurück und prüfen Sie, ob er mittig auf dem Hebegurt sitzt.

3. Erhöhen Sie die Rückenstütze, bevor Sie anheben.

4. Der Hebegurt verbleibt im Stuhl.

Entfernen des ClassicHighBackSling kann nur bei liegender Stellung des Anwenders erfolgen.

Gehen Sie in umgekehrter Reihenfolge des Anlegens vor.

## Material:

Polyesternetz: Luftiges Material, das bei Bedarf unter dem Anwender liegen bleiben kann.

## Pflegeanleitung:

Lesen Sie das Produktetikett.



Kein Weichspülmittel verwenden. Für optimale Lebensdauer des Materials nicht im Wäschetrockner trocknen.

## Größen

Hebegurte können oft sowohl bei 2- als auch 4-Punktaufhängung verwendet werden. Es ist darauf zu achten, dass die Breite des Hehebügels der Größe des Hebegurtes und den Voraussetzungen des Anwenders entspricht. Aus Sicherheits- und Hygienegründen empfiehlt sich die Verwendung von persönlich angepassten Hebegurten.

Größe		XS/Orange	S/Rot	M/Gelb	L/Grün	XL/Lila
Empf.	lbs	44-88	66-132	121-187	176-265	243-309
Anwendergewicht	kg	20-40	30-60	55-85	80-120	110-140
Höhe der Hebegurte	inch	37,5	38,5	42	43	45
	cm	95	98	106	110	115

Zweifelsfall wenden Sie sich bitte an Ihren RoMedic-Vertreter zwecks Probe, Beratung oder Information.

Wenn Sie weitere Informationen wünschen, wenden Sie sich an Ihren Spezialisten in Fragen Umsetzungstechnik, unseren Vertreter oder [www.romedic.com](http://www.romedic.com). Sorgen Sie dafür, dass Sie stets die neueste Version des Handbuchs besitzen. Sie steht auf unserer Homepage [www.romedic.com](http://www.romedic.com) zum Download bereit.

RoMedic AB

Veddestav.15, Box 640 Tel: +46 (0)8-594 773 33

SE-175 27 Järfälla Fax: +46 (0)8-594 773 44

SWEDEN

Internet: [www.romedic.com](http://www.romedic.com)

E-mail: [office@romedic.com](mailto:office@romedic.com)

**RoMedic**<sup>®</sup>  
A company in the **Handicare Group**