

Maks belastning: 300 kg



ClassicHighBackSling gir brukeren en god sittestilling og trygghetsfølelse ved forflytning. Den er utformet slik at den kan bli liggende i stolen etter en forflytning. Den gir støtte hele veien fra baksiden av knærne og helt opp til over hodet. ClassicHighBackSling er utformet for bruk i de vanligste løftesituasjoner, som f.eks. fra seng til rullestol etc.

ClassicHighBackSling inngår i en serie av løfteseler. Valget av modell og materiale avgjøres av brukerens egne funksjoner samt hvilken/hvilke typer løftesituasjoner den benyttes i. RoMedics løfteseler og heiser inngår i SystemRoMedic, en helhetstankegang innen forflytninger. SystemRoMedic har det fire kategorier av forflytninger; overflytning, posisjonering, støtte og løft.



Kontroll av funksjon

Visuell inspeksjon

Foreta regelmessige funksjonskontroller av løfteselen. Alltid etter vask. Kontroller at materialet er helt og fritt for skader og at det ikke har blitt bleket. Ved tegn på slitasje skal produktet kasseres.






Les alltid bruksanvisningen

Les alltid bruksanvisningen for samtlige hjelpemidler som er innblandet i en forflytning. Unngå risiko for utglidning eller andre ubehag ved å velge riktig størrelse på løfteselen. For stor løftesele gir høy risiko for utglidning.

La ikke brukeren være alene under løftemomentet.
Fest først selens ryggfester, deretter fester man benfestene.
Bruk godkjent løftebøyle for økt sikkerhet.

Plassering av ClassicHighBackSling skal bare utføres når brukeren ligger:

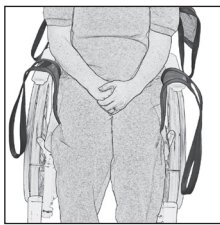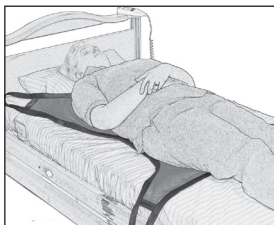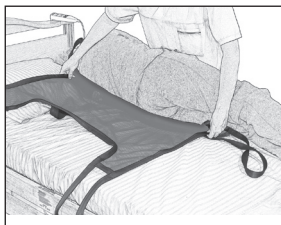

1. Vend brukeren mot deg. Plasser løfteselen slik at merkelappen er ned mot underlaget og midten av løfteselen følger brukers ryggrad. Den nedre kanten er ca 5-10 cm ovenfor brukers knehaser. Plasser løfteselens kant så langt inn under brukeren som overhode mulig.
2. Vend brukeren tilbake og kontroller at brukeren ligger midt på løfteselen.
3. Løft gjerne hjertebrettet før du begynner å løfte.
4. Løfteselen kan ved behov bli værende i stolen.

ClassicHighBackSling fjernes kun når brukeren ligger i seng/benk eller på gulv.

Følg samme prosedyre som ved plassering, men i motsatt rekkefølge.

Materiale:

Polyesternet: Luftig materiale som ved behov kan bli værende under brukeren.

Vedlikeholdsråd:

Les merkeetiketten på løfteselen.



Bruk ikke skyllemiddel. Unngå bruk av tørketrommel for lang levetid på materialet.

Størrelser

Løfteseler kan ofte benyttes til både 2- og 4-punkts løftesituasjoner. Uansett må man alltid sjekke og sikre at bredden på løftebøylen fungerer til løfteselens størrelse og brukers forutsetninger. For sikkerhet og hygiene, bruk løfteselene individuelt dvs. en sele tilpasset hver bruker.

Størrelse		XS/Oransje	S/Rød	M/Gul	L/ Grønn	XL/Lilla
Anbefalt brukervekt	lbs	44-88	66-132	121-187	176-265	243-309
	kg	20-40	30-60	55-85	80-120	110-140
Løfteselens høyde	inch	37,5	38,5	42	43	45
	cm	95	98	106	110	115

RoMedics produkter utvikles kontinuerlig. Derfor forbeholder vi oss retten til endringer i produktene uten varsel i forkant. Kontakt leverandøren for informasjon, råd og eventuelle oppdateringer.

For spørsmål om produktet ta kontakt med Handicare for utprøving, råd eller annen informasjon. Ved behov for ytterligere informasjon kontakt deres egen spesialist i forflytningsteknikk, vår representant eller www.handicare.no. Sørg alltid for at du har den siste versjonen av manualen tilgjengelig. Den kan enkelt lastes ned fra vår hjemmeside: www.handicare.no

Produsent:

RoMedic AB
Box 640
SE-175 27 Järfälla
SWEDEN
Tel: +46 (0)8-594 773 33
Faks: +46 (0)8-594 773 44
E-post: office@romedic.com
www.romedic.com

Leverandør:

Handicare AS
Øreveien 37
Postboks 163
1501 Moss
Tel: 03250
Faks: 85 02 88 22
E-post: post@handicare.no
www.handicare.no