
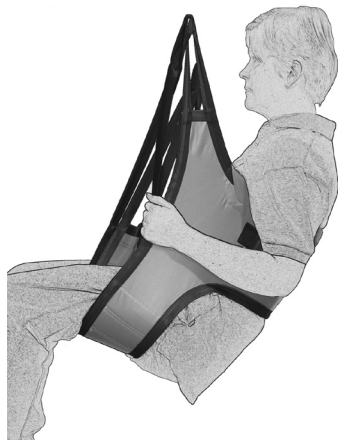


HygieneSling

SystemRoMedic

Manual

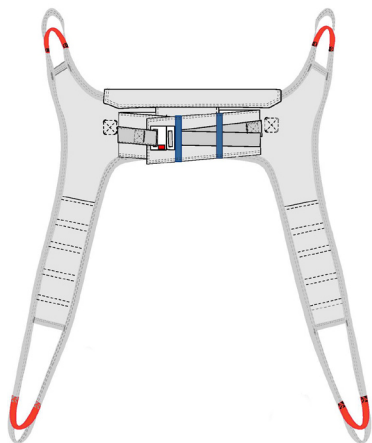

Maks belastning: 300 kg



HygieneSling er en løftesele som er enkel å applisere samtidig som den muliggjør av- og påkledning til og fra toalettbesøk. Den gir støtte hele veien fra baksiden av knærne og helt opp til over hodet. RoMedic HygieneSling er utformet for å gi støtte i løftesituasjoner som har med av- og påkledning å gjøre. HygieneSling er tilgjengelig i tre modeller: uten belte, med belte og en modell med belte og ekstra tilbake støtte.

HygieneSling inngår i en serie av forskjellige modeller av løfteseler. Valget av modell og materiale avgjøres av brukerens egne funksjoner samt hvilken/hvilke typer løftesituasjoner den benyttes i.

RoMedics løfteseler og heiser inngår i SystemRoMedic, et helhetssyn for forflytninger. SystemRoMedic har fire kategorier av forflytninger; overflytning, posisjonering, støtte og løft.

Kontroll av funksjon

Visuell inspeksjon

Foreta regelmessige funksjonskontroller av løfteselen, alltid etter vask. Kontroller at materialet er helt fritt fra skader og at det ikke har blitt bleket. Ved tegn på slitasje skal produktet kasseres.

Les alltid bruksanvisningen


Les alltid bruksanvisningen for samtlige hjelpemidler som er innblandet i en forflytning. Unngå risiko for utglidning eller andre ubehag ved å velge riktig størrelse på løfteselen. For stor løftesele gir høy risiko for utglidning.

La ikke brukeren være alene under løftemomentet.


Fest først selens ryggfester, deretter fester man benfestene. Bruk godkjent løftebøyle for økt sikkerhet.

Plassering av løftesele når brukeren sitter i rullestol/stol eller seng:

Denne løfteselen krever at brukeren har en viss funksjon, da risikoen for utglidning øker ved lavere muskelfunksjonalitet. Vær oppmerksom.

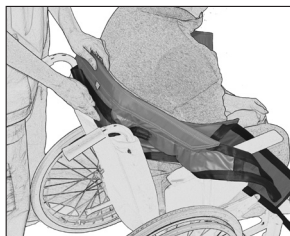

1

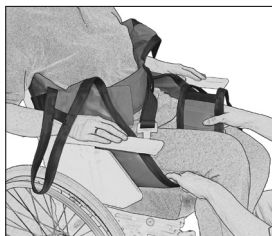

2



3




4

1. Plasser hygieneselen bak brukers ryg og 5-10 cm under armhulene. Merkelappen er midtpunktet på løfteselen og skal følge brukers ryggrad.
2. Løftestroppene til ryggdelen skal være like lange på begge sider når de kommer frem under armene. Hvis brukeren kan bøye seg fremover gjør dette plasseringen av løfteselen enklere. Plasser benstroppene under brukers lår. Dette forenkles om brukers fot plasseres på medhjelperens fot.
3. Fest beltet rundt brukeren for økt sikkerhet.
4. Kryss benstroppene før de henges opp i løftebøylen. Fest først selens ryggstropper, deretter benstroppene.

Fjerning av løfteselen når brukeren sitter:




1

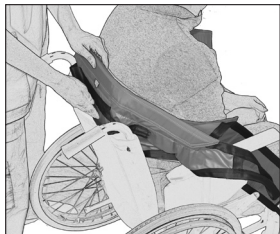


2

1. Fold benstroppen og la den gli mot seg selv når du trekker den ut på siden av låret.
2. Trekk løfteselen opp bak brukers ryg.

Etter toalettbesøk:

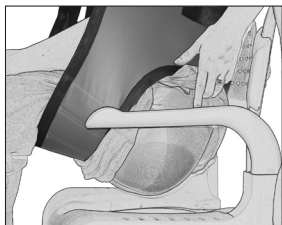


1

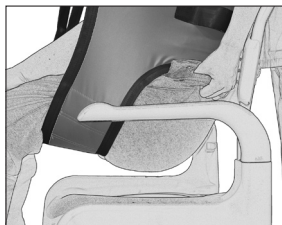

2


1. Buksene trekkes opp så mye som mulig i selens åpning. Plasser benstroppene mellom knehaser og bukselinning.
2. Hev brukeren og dra så opp buksen. Det er viktig at armene forblir på utsiden. Løft ikke høyere enn nødvendig.

Alternative plasseringer av armene:

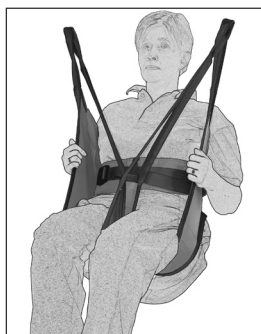

Armene plasseres vanligvis utenfor selen, men kan også plasseres på innsiden. Har brukeren lav muskelfunksjon skal armene være på utsiden.

Benstroppene krysses før de festes i løftebøylen.

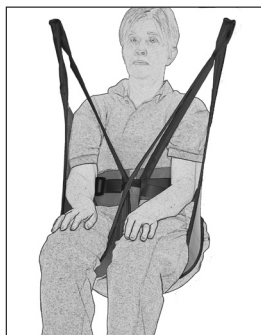

Materiale:

Polyamid: Slitesterkt materiale med lite friksjon.

Vedlikeholdsråd:

Les på produktetiketten.



Bruk ikke skyllemiddel.
Unngå bruk av tørketrommel for maksimal levetid på materialet.

Størrelser

Løfteseler kan ofte benyttes til både 2- og 4-punkts løftesituasjoner. Uansett må man alltid forsikre at bredden på løftebøylen fungerer til løfteselens størrelse og brukers forutsetninger.

For sikkerhet og hygiene, bruk løfteselene individuelt dvs en sele tilpasset hver bruker.

Størrelse		XXS/Grå	XS/Oransje	S/Rød	M/Gul	L/Grønn	XL/Lilla	XXL/Hvit
Anbefalt brukervekt	lbs	22-66	55-99	88-132	121-187	165-220,5	198-286,5	264,5-375
	kg	10-30	25-45	40-60	55-85	75-100	90-130	120-170
Løfteselens høyde	inch	19,5	25,5	29,5	34	36,5	37,5	37,5
	cm	50	65	75	87	93	95	95

RoMedics produkter utvikles kontinuerlig. Derfor forbeholder vi oss retten til endringer i produktene uten varsel i forkant. Kontakt leverandøren for informasjon, råd og eventuelle oppdateringer.

For spørsmål om produktet ta kontakt med Handicare for utprøving, råd eller annen informasjon. Ved behov for ytterligere informasjon kontakt deres egen spesialist i forflytningsteknikk, vår representant eller www.handicare.no. Sørg alltid for at du har den siste versjonen av manualen tilgjengelig. Den kan enkelt lastes ned fra vår hjemmeside: www.handicare.no

Produsent:

RoMedic AB
Box 640
SE-175 27 Järfälla
SWEDEN
Tel: +46 (0)8-594 773 33
Faks: +46 (0)8-594 773 44
E-post: office@romedic.com
www.romedic.com

Leverandør:

Handicare AS
Øreveien 37
Postboks 163
1501 Moss
Tel: 03250
Faks: 85 02 88 22
E-post: post@handicare.no
www.handicare.no